


基本スペック

- ・照明器連続使用時間 最大1時間30分(電池、容量によって異なります)
- ・照明器の電池仕様 単4のニッケル水素充電電池を1本使用します
(電池は同梱されていませんので、別途お買い求めください)
- ・推奨電池 FDK製 品番:HR-4UTHC 定格容量:900mAh
パナソニック製エネループプロ 品番:BK-4HCD 定格容量:930mAh
- ・先端の明るさ 30,000ルクス以上(腔鏡の湾曲部発光部照度)
- ・色温度 5,000K
- ・防水機能 IPX7対応(水深1m、30分浸漬)
- ・機械的強度 50N

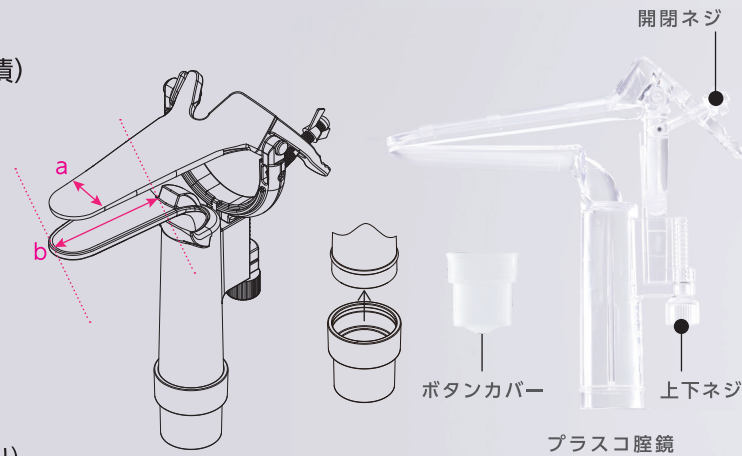

【プラスコ腔鏡】(EOG滅菌済み・単回使用・1個/袋入り)

商品名	タイプ	a(mm)	b(mm)	商品コード	JANコード	梱包入数
プラスコ腔鏡	PT-M	30.0	84.5	PT-M-03	4562231093535	3個/箱
				PT-M-10	4562231093542	10個/箱

同梱内容物

※総重量約 172.0g(電池含む)

【プラスコ照明器】(未滅菌・リユース)

商品名	タイプ	全長(mm)	商品コード	JANコード	梱包入数
プラスコ照明器	PG-1	108	PG-1	4562231093573	1本/箱

【プラスコ照明器付属品】(未滅菌・リユース)

商品名	タイプ	梱包入数
電池挿入器	KD-1	各1本/箱



滅菌方法	滅菌温度	滅菌時間	対応構成部品・付属品	
			照明器	電池挿入器
EOG滅菌	50~60℃	4時間以上	○	○
過酸化水素低温プラズマ滅菌	47~55℃	47分	○	○
オートクレーブ滅菌	121℃	20分	—	○

【類別】機械器具 50 開創又は開孔用器具 【販売名】プラスコ 【一般の名称】開孔器(汎用光源)
【医療機器届出番号】45B2X10003000300 【クラス分類】クラスI(一般医療機器)

プラスαの視界で
どこでも診療が可能



拡張器と光源がひとつになって
術野を明るく照らす
コードレスLED照明付き
透明プラスチック腔鏡



<総販売元/問合せ先>

トイツ株式会社

<https://www.toitu.co.jp>



〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西
1丁目5番10号
TEL 03-3496-1121
FAX 03-3496-1376

<製造販売元>



<https://www.yasui-kk.co.jp>



安井株式会社
メディカル部門
〒889-0697
宮崎県東臼杵郡門川町
大字加草2725番地
【本社・工場】TEL 0982-63-7111(代)
FAX 0982-63-7130

不具合、故障などが発生した場合は、販売店までご連絡ください。

MD8-JPjaAH-2301(0)

POINT

01

光る

コードレス
照明器付きで
周囲を明るく照らす

POINT

02

軽量・高靱性

軽量で靱性が高い
ポリカーボネート
樹脂を使用

POINT

03

滅菌済

プラスコ腔鏡は
EOG滅菌済
ディスプレイザブル

POINT

04

ベッド上での内診

製品を逆さまにして
使用できるので、
ベッド上での内診も可能

軽量でコードレス LED照明器



明るく
見やすい
視野を

光源がダイレクトに
視野を照らす

電源
OFF



電源
ON



Plasco™
プラスコ